

PULPDENT®

INNOVATION DENTAIRE DEPUIS 1947

INSPIRÉ PAR LA NATURE
DIVERS ET ACCESSOIRES



TOUS LES PRODUITS PRÉSENTÉS DANS CE CATALOGUE SONT GARANTIS
SANS BPA, SANS BIS-GMA ET SANS BIS-DMA.



KOOL-DAM™

PROTECTION DE LA GENCIVE ET DES DENTS

Ne chauffe pas pour le confort du patient

Reste flexible après durcissement, comme du caoutchouc

Résiste aux déchirements



HYDROPHILE



PHOTOPOLYMÉRISABLE



KOOL-DAM est une digue liquide destinée à protéger les tissus mous, dents et surfaces de réparation. Appliquez KOOL-DAM facilement à l'aide d'une seringue et d'embouts applicateurs sur la gencive avant le blanchiment, l'application d'un composite, ou autres soins nécessitant une protection intra-orale, puis

photo-polymérisez. Vous pouvez également utiliser KOOL-DAM pour le comblement des contre-dépouilles et embrasures lors des empreintes. KOOL-DAM ne chauffe pas pendant la photopolymérisation et reste souple après la prise. KOOL-DAM se place et s'enlève facilement.





1 Placer KOOL-DAM afin de protéger la gencive. Photopolymériser 20 sec.






2 Appliquer KOOL-DAM pour protéger les tissus mous avant le blanchiment.



3 Placer KOOL-DAM sur le modèle avant de créer la gouttière de blanchiment.

| | | |
|---|------------|--|
|  | PD | Kit de 2 seringues de 3 ml + 10 embouts, 18 ga + 10 embouts, 20 ga |
|  | PDB | 10 seringues de 3 ml |

| | | |
|---|--------------|---------------------------------|
|  | 18C20 | 20 embouts courbés, vert, 18 ga |
|  | 19K20 | 20 embouts courbés, noir, 19 ga |
|  | 20L20 | 20 embouts courbés, rose, 20 ga |



SNOOP™

DÉTECTEUR DE CARIES

Contraste entre la dentine infectée et saine

Permet une détection précise

Fiabilité accrue, pas d'erreur



La dentine cariée est constituée de deux couches distinctes :

- La première couche extérieure infectée, décolorée, non-saine et qui ne peut pas être reminéralisée.
- La couche intérieure de la dentine qui n'est pas infectée, est reminéralisable et ne doit pas être enlevée.

Grâce à sa formule de propylène glycol, Snoop permet de distinguer ces deux couches en seulement 10 secondes. La couche à enlever est colorée naturellement en bleu foncé avec une teinture au collagène dénaturé qui n'est présente que dans la dentine infectée. Ce contraste important entre la dentine infectée et saine permet ainsi au praticien de préserver la dentine saine qui ne doit pas être enlevée.



1 Caries évidentes.



2 Appliquer Snoop pendant 10 secondes.



3 Nettoyer la dentine infectée.



4 Appliquer Snoop à nouveau puis nettoyer. La coloration disparaît lorsqu'il n'y a plus d'infection.



SNOOP Bouteille de 12 ml



PIC-N-STIC™

BÂTONNETS POUR LA PRÉHENSION DE PETITS ÉLÉMENTS PROTHÉTIQUES

2mm de diamètre, 5mm de long, bout adhésif


Manipulation plus facile de petits éléments prothétiques

Nombreuses applications pratiques



Cette petite tige à bout adhésif vous permet de manipuler avec aise de petits objets. Par simple pression, le bout adhésif se colle à l'objet que vous pouvez ensuite travailler ou placer avec

précision. L'adhésif ne se transfère pas à l'objet; pour relâcher, il suffit de tourner légèrement la tige. Pic-n-Stic mesure 2 mm de diamètre et 5 cm de longueur.

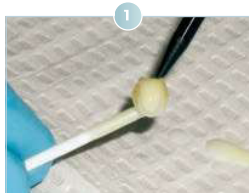

1 Le ciment Embrace est placé sur un inlay maintenu à l'aide du Pic-n-Stic.



2 Le Pic-n-Stic aide au placement de l'inlay.



3 Le Pic-n-Stic est aussi utilisé pour la pose de brackets.



PIC

Boîte de 60 Pic-n-Stic



FLECTA™

MIROIRS JETABLES

Pratique

Ludique en dentisterie
pédiatrique

Hygiénique



Les miroirs jetables Flecta sont idéals pour de nombreux environnements dentaires. Avec 40% de surface réfléchissante supplémentaire, ces miroirs facilitent le travail au quotidien. Parfaits pour la dentisterie générale comme pour des procédures

plus pointues, les miroirs Flecta sont aussi pratiques pour les cliniques mobiles ou des programmes de prévention en milieu scolaire. En faire cadeau aux patients, surtout en dentisterie pédiatrique, permet d'encourager une meilleure hygiène buccale.



40% de surface réfléchissante
supplémentaire.
Pas de rayures ni taches.



Vue postérieure élargie grâce aux
miroirs Flecta jetables.



FLEC

Boîte de 200 miroirs



T-BANDS

MATRICES EN BANDES INDIVIDUELLES AUTONOMES



Les T-Bands ne nécessitent pas d'élément de retenue grâce à leur extrémité repliable en «T». Ces matrices malléables, en laiton ou en acier inoxydable, sont d'une épaisseur de 0,05 mm et

d'une largeur de 4mm. Elles sont particulièrement adaptées et appréciées en dentisterie pédiatrique.

| | | |
|--|--------|---|
| | BTBS/N | Laiton (0,05 x 4mm) - Étroite Boîte de 100 |
| | BTBS/W | Laiton (0,05 x 4mm) - Large Boîte de 100 |

| | | |
|--|--------|---|
| | BTSS/N | Inox (0,05 x 4mm) - Étroite Boîte de 100 |
| | BTSS/W | Inox (0,05 x 4mm) - Large Boîte de 100 |

MANCHES ET PINCEAUX

ACCESSOIRES D'APPLICATION



| | | |
|--|-----|--|
| | HAN | Manche pour pinceau, couleur aléatoire |
|--|-----|--|

| | | |
|--|----|-----------------------|
| | BR | 100 Pinceaux de 24 mm |
|--|----|-----------------------|



MIXING WELLS

GOSETS À MÉLANGE JETABLES

Compatible avec tous les matériaux dentaires

Disponible en configuration de deux ou quatre godets

Fabriqué d'un polymère à forte densité



MW-2

Configuration à 2 godets
Boîte de 480



MW-4

Configuration à 4 godets
Boîte de 420

MINI-BOLS

GOSETS POUR RÉSINES

Ventouse pour une stabilité accrue

Silicone anti-adhésif

Stérilisable par toutes les méthodes



B-MS3

Petit - 8 ml (Ø 2,5 cm),
Lot de 3 mini-bols



B-MM2

Moyen - 30 ml (Ø 4,1 cm),
Lot de 2 mini-bols



B-ML

Grand - 80 ml (Ø 5,7 cm),
1 mini-bol



B-MA

Assortiment de 4 mini-bols,
2 petits, 1 moyen et 1 grand



MATRICES DE COFFRAGE



POUR LA RÉALISATION DE MOIGNONS PROTHÉTIQUES

Transparent pour photopolymérisation

En polyéthylène

Ne colle pas aux matériaux utilisés



| | | |
|---|---------------|--|
|  | HCF-AS | Assortiment de 64 matrices, 16 de chaque taille : S, M, L, XL |
|  | HCF* | Boîte de 64 matrices : S, M, L ou XL * Tailles : Small (1), Medium (2), Large (3), XLarge (4) |

BAGUES D'IDENTIFICATION

IDENTIFICATION ET ORGANISATION DES INSTRUMENTS



Stérilisable par toutes les méthodes

Assortiment de couleurs disponibles (standard ou large)



Silicone de qualité médicale



TAILLE STANDARD : 3 mm diamètre interne x 3 mm de largeur

| | | |
|---|---------------|-----------------------------------|
|  | CR-AS | 100 bagues, 11 couleurs assorties |
|  | CR*-50 | 50 bagues, 1 couleur |

TAILLE LARGE : 5,5 mm diamètre interne x 4 mm de largeur

| | | |
|---|----------------|---|
|  | CR-ASL | 60 bagues, 7 couleurs assorties |
|  | CR*-60L | 60 bagues, 1 couleur (Gris et Marron indisponibles) |

Couleurs disponibles : * = (1) Blanc, (2) Jaune, (3) Bleu, (4) Rouge, (5) Vert, (6) Noir, (7) Gris, (8) Marron, (9) Orange, (10) Mauve, (11) Rose

File-Rite™ semi-gel



30F50

50 embouts droits,
orange, 30 ga

Etch-Rite™
Etch Royale™
Porcelain Etch gel™



25B20

20 embouts courbés,
bleu clair, 25 ga

embrace™ sealant puits & fissures
Ortho-Coat™



23R20

20 embouts courbés,
rouge, 23 ga

Multi-Cal™



22D20

20 embouts courbés,
bleu foncé, 22 ga

embrace™ sealant puits & fissures



22K20

20 embouts courbés,
noir, 22 ga

Silane™



22DR15

15 embouts souples
courbés, bleu/rouge,
22 ga

KOOL-DAM™
Lime-Lite™



20L20

20 embouts courbés,
rose, 20 ga

KOOL-DAM™



19K20

20 embouts courbés,
noir, 19 ga

Kleer-Veneer™
KOOL-DAM™



18G20

20 embouts courbés,
vert, 18 ga

TempCanal™
enhanced



TE20N

12 aiguilles
d'irrigation endo,
27 ga

Seal-n-Shine
OPAQUER
FIRST-COAT™



P2520

20 embouts
floqués

spee-dee™ build-up



F20N2

20 embouts Automix
transparents directionnels

spee-dee™ build-up



FD20

20 embouts Automix et
pointes intra-buccales

Tuff-Temp™ Plus 50ml



FSB20

20 embouts
Automix

ACTIVA BioACTIVE™
RESTAURATION
ACTIVA BioACTIVE™
Fond de cavité
ACTIVA BioACTIVE™
CIMENT



A20N1

20 embouts Automix
transparents
directionnels, 20 ga

ACTIVA BioACTIVE™
RESTAURATION



AD20T

20 embouts Automix
transparents
intra-oraux, courts

ACTIVA BioACTIVE™
RESTAURATION



AD20R

20 embouts Automix
transparents
intra-oraux, longs

ACTIVA BioACTIVE™
RESTAURATION



AS20

20 embouts Automix
transparents

Tuff-Temp™ Plus 5ml
ewbrace™ CIMENT
ACTIVA BioACTIVE™
CIMENT



A20

20 embouts
Automix

A50N1

50 embouts Automix
transparents
directionnels, 20 ga

AD50T

50 embouts Automix
transparents
intra-oraux, courts

AD50R

50 embouts Automix
transparents
intra-oraux, longs

AS50

50 embouts Automix
transparents

A50

50 embouts
Automix